

## PROBLEMA

Mi extractor de leche Ardo Alyssa no enciende



## SOLUCIÓN

- Comprueba que la batería del Alyssa esté completamente cargada durante al menos 2 horas.
- Presione el botón de encendido/apagado durante al menos 2 segundos para encender o apagar Alyssa; Esta es una medida de seguridad para que Alyssa no se encienda o apague accidentalmente.

Mi extractor de leche Ardo Alyssa no enciende



- Asegúrese de que su extractor de leche esté conectado a la corriente.
- Pruebe con una toma de corriente alternativa.
- Asegúrese de que su adaptador de corriente o cable USB no estén dañados.
- Si su Alyssa aún no se enciende, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Ardo.

## PROBLEMA

## SOLUCIÓN

Mi extractor de leche Alyssa se apaga sola después de un corto tiempo



- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada durante al menos 3 horas.
- Compruebe si el botón Memoria Plus (icono superior izquierdo) parpadea; si parpadea, la función Memoria Plus se ha activado con una sesión de extracción anterior. Para borrar el programa almacenado en Memoria Plus, presione y mantenga presionado el botón Memoria Plus hasta que escuche un pitido; el botón Memoria Plus dejará de parpadear y Alyssa funcionará normalmente.
- Si la bomba está completamente cargada y el botón Memoria Plus no parpadea cuando la bomba se enciende por primera vez, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Ardo.



Mi extractor de leche succiona poco o nada de leche



- Si no está utilizando el conjunto de bomba que vino con Alyssa, asegúrese de utilizar la cubierta correcta del conjunto de bomba con inserto en la tapa.



- Para volver a pedir conjuntos de bombas adicionales para que funcionen con Alyssa, asegúrese de pedir conjuntos de bombas Ardo que estén marcados para funcionar con TODOS los extractores de leche Ardo.
- Los sacaleches que se enviaron con los extractores de leche Calypso NO funcionarán correctamente con Alyssa; Los juegos de sacaleches enviados con Alyssa funcionarán perfectamente con los extractores de leche Calypso.

## PROBLEMA

Mi extractor de leche tiene poca o ninguna succión



Mi extractor de leche tiene poca o ninguna succión





Mi extractor de leche tiene poca o ninguna succión




## SOLUCIÓN


- Si bombea solo en un lado (bombeo único), asegúrese de que el conector del segundo tubo esté cerrado.

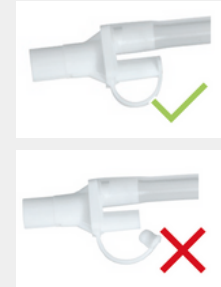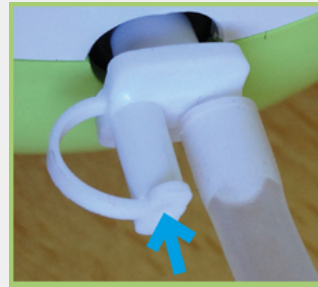

- Asegúrese de que el conector del tubo esté conectado correctamente al cuerpo de la extractor de leche.

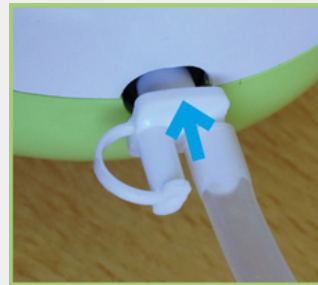

- Al armar el conjunto de bomba después de la limpieza, asegúrese de que la válvula de labio blanco también esté ensamblada correctamente.

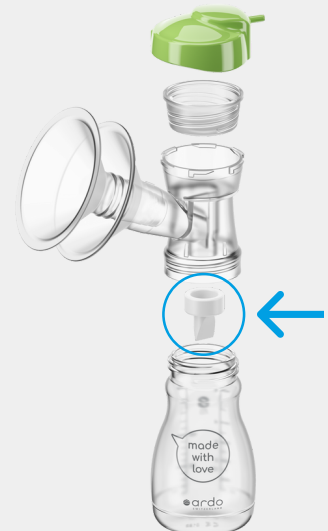

## PROBLEMA

Mi extractor de leche tiene poca o ninguna succión



## SOLUCIÓN

- Al retirar la válvula con labios, para limpiarla, NO utilice las uñas; en su lugar, simplemente tire con los dedos, la válvula de labio es muy flexible.
- Asegúrese de que la válvula con labios esté intacta, sin rasgaduras, grietas ni labios pegados.
- Las válvulas con labio Ardo deben tener una abertura ligera entre los labios.
- Reemplace las válvulas de labio si no están intactas.



Mi extractor de leche tiene poca o ninguna succión



- Asegúrese de que el recipiente de membrana quede plano en la parte superior del seno ANTES de colocar la tapa.
- Asegúrese de que el recipiente de membrana no esté dañado.
- Reemplace el recipiente de membrana si está dañado.



## PROBLEMA

Mi extractor de leche tiene poca o ninguna succión



## SOLUCIÓN


- Asegúrese de que el lado liso del recipiente de membrana quede hacia afuera con las crestas hacia el interior.



Mi extractor de leche tiene poca o ninguna succión



- Asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada.
- Alinee la marca en la parte superior del embudo con brida con la cubierta de la marca, luego gírela en el sentido de las agujas del reloj ("Alinear & Sellar").

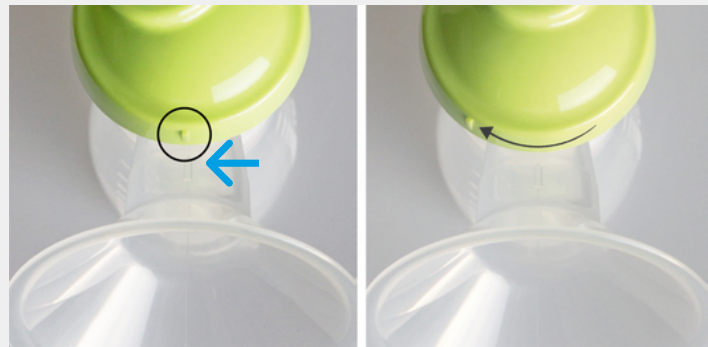

## PROBLEMA

Mi extractor de leche tiene poca o ninguna succión



## SOLUCIÓN

- Si utiliza un inserto duro, asegúrese de que esté ensamblado correctamente.
- Empuje suavemente el inserto dentro de la cubierta del pecho.
- Gire y gire el inserto hacia la derecha para crear un sello hermético.



Mi extractor de leche tiene poca o ninguna succión



- Si utiliza un inserto de silicona, asegúrese de que esté colocado correctamente en la cubierta del seno.
- Coloque el inserto en la cubierta del seno y empújelo completamente hacia adentro hasta que esté seguro.

